


ES

En esta caja encontrarás

1.

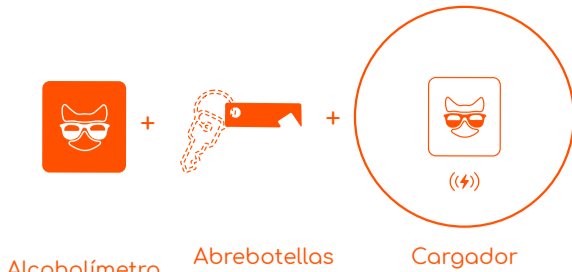


Alcolímetro

Abrebotellas con imán

Cargador inalámbrico

2.

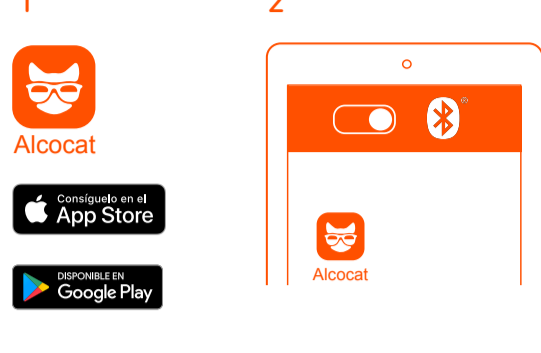

1



Alcolicat



2



3.



3

4

Empareja Alcolicat con tu smartphone

1. Descarga la app Alcolicat desde la App Store o Google Play
2. Activa el bluetooth y abre la app
3. Agita el alcoholímetro 3 veces hasta que se enciende la LED blanca en el dispositivo
4. Empareja el alcoholímetro con el móvil y empieza a usarlo

4.

Señales de luz led del alcoholímetro

- Luz blanca difuminada - listo para emparejar con tu smartphone
- Luz roja corta - la batería esta vacía
- Luz blanca estable - los dispositivos están emparejados

5.

- #### Como se utiliza
1. Presiona el botón en la app o vuelva a agitar el dispositivo después de que se hayan encendido las luces LED blancas
 2. Tan pronto como las luces LED azules comienzan a parpadear, el alcoholímetro comienza a calentarse
 3. Mientras sostenga el alcoholímetro, asegúrese de que los pequeños agujeros para el paso del aire, que se encuentran a ambos lados del dispositivo, no se encuentran cubiertos.
 4. Cuando las luces LED azules parpadean rápidamente, sople 5 segundos desde los pulmones hacia el agujero del alcoholímetro

5. La luz LED azul estable indica que el alcoholímetro está midiendo la cantidad de alcohol en sangre
6. La luz LED azul parpadeante después del proceso de medición significa que se ha calculado la cantidad de alcohol en sangre
7. La luz roja parpadeante significa error. Inténtalo de nuevo
8. Los resultados de la medición de la cantidad de alcohol en sangre también están indicados en el dispositivo:
 - Luz verde - sobrio
 - Luz amarilla - menos del 0.2%
 - Luz roja - más del 0.2%

7.

En caso de que la batería del teléfono inteligente esté vacía, podrá usar el alcoholímetro por separado. Los colores de la luz LED indicarán el resultado aproximado de la medición. Agita el dispositivo y sigue las instrucciones de luz LED como se ha descrito anteriormente

Resultado exacto

Para obtener un resultado preciso, espera 20 minutos después de tomar una última bebida o un cigarrillo. Si el producto no se ha utilizado durante 24 horas, el dispositivo puede mostrar un resultado inferior debido a las partículas de polvo. Si es necesario, repite el soplado.

8.

- #### Cargador inalámbrico
- La LED roja en el dispositivo indica que la batería esta baja. La carga puede tardar hasta 180 minutos.
1. Conecta el cable micro-USB al cargador
 2. Coloca el alcoholímetro exactamente en el centro del cargador
 3. Sigue la luz parpadeante:
 - Luz roja - Menos del 20% de batería
 - Luz amarilla - 20 - 70% de batería
 - Luz verde - 70 - 99% de batería
 4. Luz verde estable - el alcoholímetro está completamente cargado

9.

Garantía: Sin limitar lo anterior, esta garantía no se aplica a lo siguiente:

- Usar con accesorios que no sean Alcolicat, como el cargador inalámbrico;
- El uso normal y el rasgón o el envejecimiento del producto, como rasguños, abolladuras, andan arrastrando los pies, más aflojamiento y desgaste de partes con el tiempo;
- Defectos o daño causado por mal uso, accidente, modificación, tensión extraña, modificación, reparación impropia o no autorizada, almacenaje impropio o aplicaciones de terceros descargadas al producto;
- Daño causado usando los productos fuera de los usos permitidos o intencionados descritos en instrucciones proporcionadas por Alcolicat;

10.

- Modificaciones de los programas fijos del producto o software por cualquiera además de Alcolicat oficialmente;
- Con uso incorrecto del voltaje, fuente de alimentación o de las baterías
- Daño debido a la humedad excesiva
- El alcoholímetro de Alcolicat ha sido usado antes de 20 min después de la última toma de bebida alcohólica
- Los compuestos de silicona / gases de dañar el producto. El producto está diseñado para su uso en salas llenas de aire fresco.

Para salvar un árbol, le invitamos a consultar los **Términos y Condiciones, Política de Privacidad, Condiciones de Uso, Uso del dispositivo y la FAQ** en alcolicat.com

