


1.

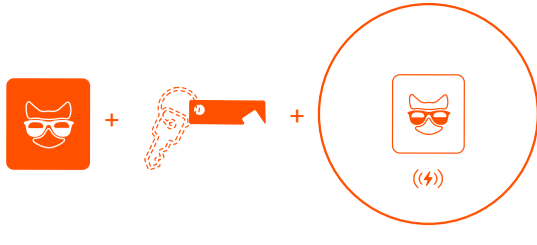

Alcometri

Pullonavaaja
magneetillaLangaton
lataaja

2.



Alcocat



2



3.



4



4.

Muodosta laitepari Alcocatin ja älypuhelimesi kanssa

1. Lataa Alcocat sovellus App Storesta tai Google Play Storesta
2. Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth ja avaa sovellus
3. Ravista alkometriä 3 kertaa käynnistääksesi laitteen valkoiset LED-valot
4. Muodosta laitepari Alcocatin ja älypuhelimesi välille ja aloita käyttö

Alkometrin LED-valosignaalit

Hiipuva valkoinen valo - valmis laitepariksi älypuhelimien kanssa

Lyhyt punainen valo - virta on lopussa

Tasainen valkoinen valo - laitepari on muodostettu

5.

**Ohje**

1. Paina sovelluksen näppäintä tai ravista laitetta uudelleen kun valkoinen LED-valo on päällä



2. Kun sininen LED-valo alkaa vilkkua, alkometrin valmistelu on alkanut



3. Kun pitelet Alkometriä, varmista että pienet ilmanvaihtoreiät laitteen sivuilla eivät ole peitetty



4. Kun sininen LED-valo vilkkuu nopeasti, puhalla 5 sekuntia syvältä keuhkoista alkometrin putkeen

5. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että alkometri mittaa BAC-lukemaa

6.

6. Vilkkuva sininen LED-valo mittausprosessin jälkeen tarkoittaa, että BAC-lukema on laskettu

7. Vilkkuva punainen valo tarkoittaa virhettä. Yritä uudelleen

8. Mitatut BAC-tulokset on myös näytetty laitteessa:

vihreä valo - selvä

keltainen valo - alle 0.2‰

punainen valo - yli 0.2‰

Jos älypuhelimessa ei ole virtaa, voit käyttää alkometriä erikseen. LED-valon värit osoittavat suuntaa-antavat mittaustulokset. Ravista laitetta ja seuraa LED-valon ohjeita kuten yllä on kuvattu.

7.


Tarkka tulos

Saadaksesi tarkan mittaustuloksen, odota 20 minuuttia edellisen juoman tai savukkeen jälkeen. Jos laitetta ei ole käytetty 24 tuntiin, se voi osien pölyisyydestä johtuen näyttää alempaa mittaustulosta. Jos tarpeellista, puhalla uudestaan.

Langaton lataus

Punaiset LED-valot osoittavat että alkometrin virta on lopussa. Akun lataus kestää noin 3 tuntia.

8.

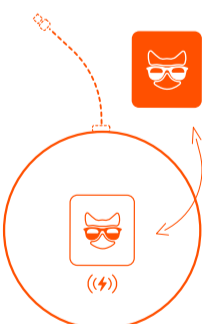

1. Yhdistä mikro USB-kaapeli lataajaan

2. Aseta alkometri tarkasti lataajan keskelle

3. Seuraa vilkkuvaa valoa:

Punainen valo - alle 20% ladattu

Keltainen valo - 20-70% ladattu

Vihreä valo - 70-99% ladattu

4. Tasainen vihreä valo - alkometri on täyteen ladattu

9.

Takuu: Ilman rajoituksia aikaisempaan, tämä takuu ei kata seuraavaa:

- Käyttö Alcocatin ulkopuolisten laitteiden kuten langattoman lataajan kanssa;
- Normaali tuotteen kuluminen ja ikääntyminen, kuten naarmut, lommot, hankaumat ja osien löystyminen ajan kuluessa;
- Viat ja vauriot, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuudesta, muunnoksista, epätyypillisestä rasituksesta, modifikaatioista, epäsovivasta tai valtuuttamattomasta huollosta, epäsovivasta säilytyksestä tai kolmannelta osapuolelta ladatuista applikaatioista;
- Vauriot, jotka johtuvat Alcocatin ohjeistusten vastaisesta käytöstä;

10.

- Muiden kuin Alcocatin tekemät laiteohjelmiston tai muiden ohjelmistojen muunnokset;

- Sopimattoman jännitteen, virtalähteen, tai paristojen yhteiskäyttö; tai

- Liiallisen kosteuden aiheuttamat haitat;

- Alcocat alkometriä on käytetty alle 20 minuuttia alkolijuoman nauttimisesta;

- Silikoniyhdistelmät/kaasut vahingoittavat tuotetta.

Tuote on tarkoitettu käyttöön huoneissa, joissa on raikas ilma

Pelastaaksesi puun, ole hyvä ja katso videot koskien yksityisyydensuojaa, ehtoja, laitteen käyttöä sekä FAQ osoitteessa alccocat.com.

